

Assembly Instructions


Instrucciones de Asamblea

Remove all parts from box and verify that you have received two (2) Handlebars with Loop-Lock Brakes, one (1) Basket, one (1) Backrest.

NOTE: If any parts are missing, do not return to the place of purchase. Contact Duro-Med Industries at 877-505-6190.

Quite todas piezas de la caja y verifique que usted haiga recibido 2 Pasamanos con Frenos de Cerradura de Lazo; 1 Canasta; 1 Barra de Descanso

NOTE: Si alguna piezas faltan no lo compre, numero y lugar de contacto: Duro-Med Industries 877-505-6190.

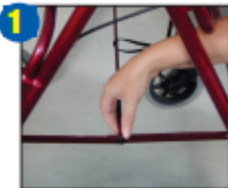

- 1. To open your rollator, push the folding hinge down until it locks securely in a straight position.**

A abrir su rollator, empuje la barra plegable hacia abajo hasta que este en posición recta en ambos lados.



- 2. Place both loose handgrip pieces, into the handlebar openings and adjust to the desired height. Remove the knob, washer and screw from the handlebar. Insert the screw, with the washer on it, through the desired hole aligned in the rollator bar and screw the knob back on securely.**

Coloque ambos manijas flojos de la mano, en las aperturas del marco y adáptese a la altura deseada. Quite la perilla, la arandela y el tornillo del marco e inserte el tornillo, con la arandela sobre ello, por el agujero deseado alineado en el rollator atornillando la perilla hacia atrás hasta que este bien ajustado.



- 3. Insert the backrest into rollator frame securely making sure the retainer pins are locked into position through the frame holes on both sides.**

Inserte el respaldo en el marco de rollator asegurándose que los pines sobresalgan por el agujero en ambos lados.



- 4. Test and adjust the tension on the braking system mechanism to ensure proper and secure braking before use.**

Pruebe y ajusta la tensión sobre el mecanismo del sistema de frenado para asegurar que el frenado es apropiado y seguro antes del empleo.



- 5. Secure the basket in the proper location. Flip up the seat and place the basket on the rollator crossbars or position the basket hooks over the front bar (not shown).**

Si su rollator viene con una canasta, asegure la canasta en la posición apropiada. Empuje el asiento hacia arriba y coloque la canasta sobre barras rollator o coloque los ganchos de la cesta sobre la barra (no esta demostrado).