

Instructions

Adjustable Shower Stool

Item # 522-9801-1900

Assembly Instructions

1. Place the round seat (4) upside down on a flat surface.
2. Align the support legs (1 and 2) to the seat. Using the screw knob (a) and a bent washer (b), hand tighten securely in the center of the seat.
3. Align the remaining holes on the seat with the remaining holes on the legs. Use the screw knobs (a) and straight washers (c) to secure the legs to the seat.
4. Adjust the extension legs in 1" increments to the desired height, and lock the pins into place.


Caution: Make sure all screw knobs are tightened securely. Do not overtighten as it could strip the threads. For your safety, the four extension legs must always be locked in the same height position. All pins must be pushed completely through the pinholes before using.

Note: If any parts are missing, do not return to the place of purchase, call 800.622.4714.

Warning: Do not use if any parts appear to be loose or damaged as personal injury may result.

Assembly Codes

- 1 – Support Leg (1)
- 2 – Support Leg (1)
- 3 – Round Seat (1)
- a – Screw Knobs (5)
- b – Bent Washers (1)
- c – Straight Washers (4)

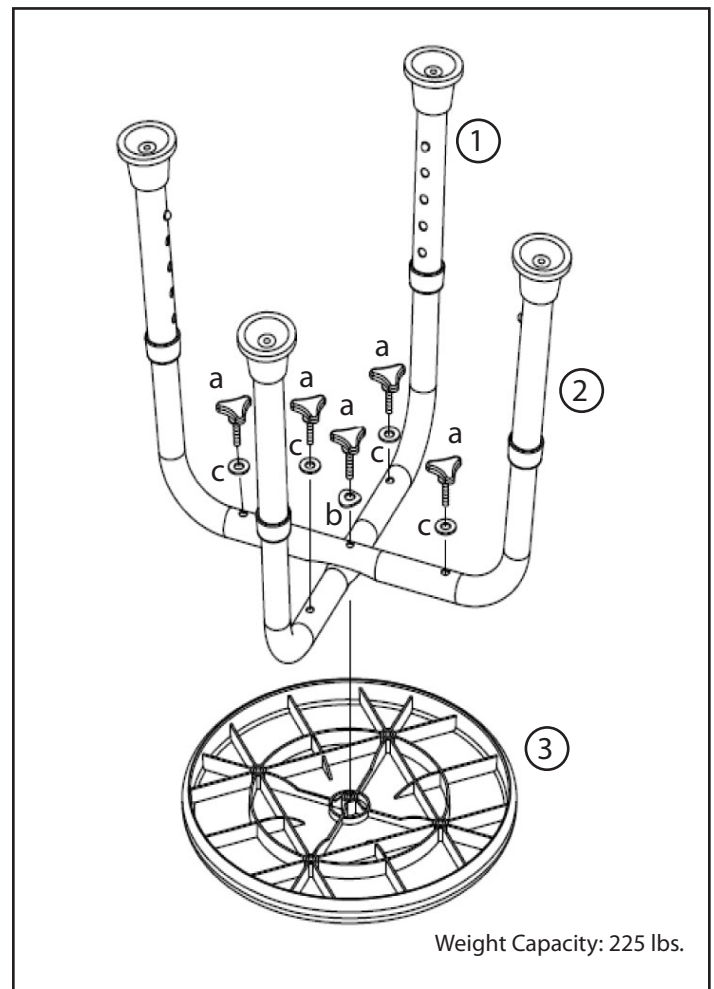

CAUTION

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Instrucciones

Banco ajustable para regadera

Artículo n.º 522-9801-1900

Instrucciones de ensamble

1. Coloque el asiento redondo (4) boca abajo sobre una superficie plana.
2. Alinee las patas de soporte (1 y 2) con el asiento. Usando la perilla roscada (a) y una arandela curva (b), apriete manualmente con firmeza al centro del asiento.
3. Alinee el resto de los orificios del asiento con el resto de los orificios de las patas. Use las perillas roscadas (a) y las arandelas rectas (c) para fijar las patas al asiento.
4. Ajuste las patas extensibles en incrementos de 1 pulg. hasta la altura deseada, y trabe las clavijas en su lugar.


Precaución: Asegúrese de que todas las perillas roscadas estén ajustadas de manera segura. No ajuste en exceso porque podría estropear las roscas. Por su seguridad, las cuatro patas extensibles siempre deben estar trabadas a la misma posición de altura. Todas las clavijas deben pasar completamente por los orificios antes del uso.

Nota: si falta alguna pieza, no regrese al lugar donde realizó la compra; llame al 800-622-4714.

Advertencia: No use el producto si alguna pieza parece estar suelta o dañada, pues esto podría ocasionar lesiones personales.

Códigos de armado

- 1 – Pata de soporte (1)
- 2 – Pata de soporte (1)
- 3 – Asiento redondo (1)
- a – Perillas roscadas (5)
- b – Arandelas curvas (1)
- c – Arandelas rectas (4)

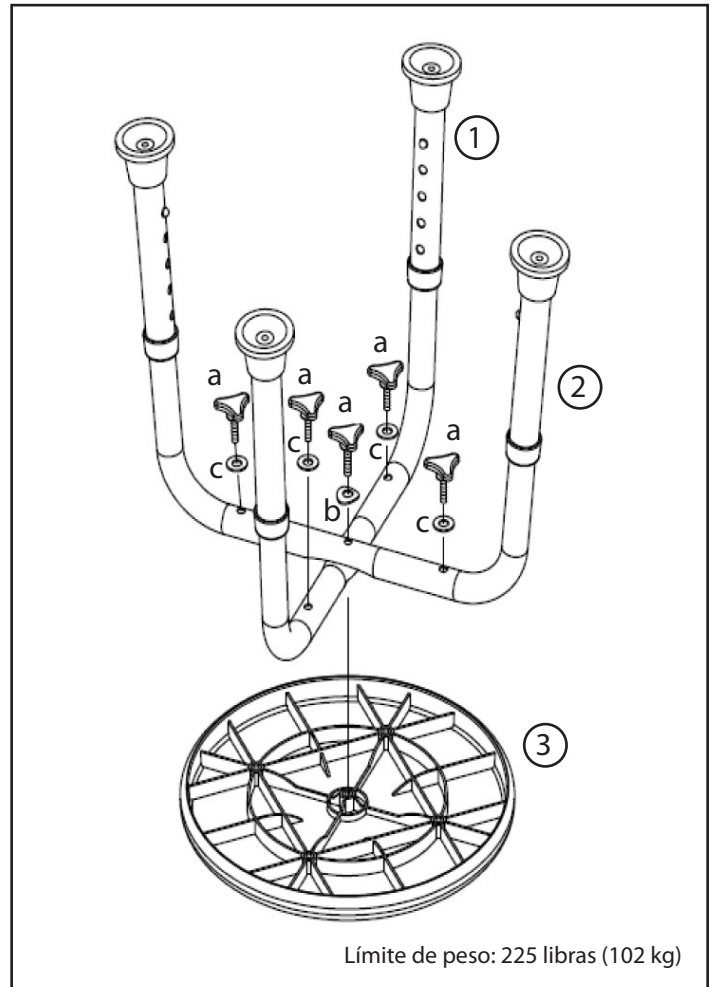

PRECAUCIÓN

Este producto contiene látex de goma natural, que puede causar reacciones alérgicas.